

DATA ENSAIO: 10/12/2020 20201215/195918 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	IIPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder	CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen		
Endereço:	Av Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC -	CEP: 88309-	480

### 02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle de Qualidade		Sala:	TOMOGRAFIA	
Equipomento	MARCA	MODELO	Nº S	SÉRIE PATRIMÔNIO	
Equipamento:	TOSHIBA	AQUILION	7YC19	932379 120000429	

## 03| PADRÕES UTILIZADOS

Os ensaios foram realizados com os simuladores fornecidos pelo fabricante do aparelho de tomografía.

Jnit

MARCA	MODELO	Nº SÉRIE	
RaySafe	8251010-6	228517	

Sensor Externo: X2 CT Sensor

MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
RavSafe	X2 CT	256977

Rastreabilidade: RaySafe o10112657l256977d25

#### 04I METODOLOGIA


Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

#### **OBSERVAÇÃO:**


A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.



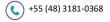



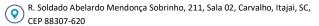





20201215/195918

DATA ENSAIO: 10/12/2020 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

## A | EXATIDÃO DA TENSÃO

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos. Tolerância: ≤ 5%. Nível de suspensão: >10%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Foco [FF/	[FF/FG] ÚNICO		DFD [cm] 100								
VALORES NOMINAIS			VALC	RES M	IEDIDOS						
Tensão	Corrente		Corrente		Corrente Tempo		Tens	ão			
[kVp]		nA]	[ms]	Tensão [kVp]		k	U95				
				80,3		IX	0 30				
0.0	0	0.0	1000	80,2		0.0	1.0				
80	3	00	1000	80,2		2,0	1,6				
				80,3							
		300		102,3							
100	300		1000	102,1		2,0	1,6				
100	O		000	000	000	1000	102,3		2,0	1,0	
				102,3							
				123,6							
120	120 300	300	1000	122,2		2,4	3,2				
			300	230				127,2	. 5 5 5		_, .
				123,6							
Desvio Máximo				Tensa	ăo						
Reprodutibilidade (%)				4,0							
Exatidão (%)			3,5								
		xatidão	`	Conforme							
Resultad	o Repro	odutibilid	ade (C/NC)		Confor	me					

### B | VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE


Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: vide tabela abaixo

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela F.

_		Técnica utilizada				Medid	а	Nível de Referência	Resultado
Exames	Tensão [kVp]	Corrente [mAs]	Pitch	Nº Rot.	CTDIvol [mGy]	k	U95	CTDIvol(mGy)	C / NC
Abdomen Adulto	120,0	160	0,938	2,66	16,8	2,0	1,5	25,0	Conforme
Crânio Adulto	120,0	200	0,688	3,00	53,4	2,0	1,5	70,0	Conforme
Abdomen Infantil	120,0	40	0,938	3,34	8,7	2,0	1,5	20,0	Conforme



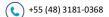







DATA ENSAIO: 10/12/2020 20201215/195918 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

## C | RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Resolução normal: ≥ 6pl/cm, Alta resolução: ≥ 10 pl/cm.

Nível de suspensão: Resolução normal: < 3 pl/cm, Alta resolução: < 5 pl/cm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Nome do Protocolo	Resolução	Reconstrução (filtro)	Espessura de corte reconstrução (mm)	Grupos Visualizados	Resolução espacial (pl/cm)
Abdomen S/C	Normal	FC 08	2	5	8,3
ADDOTTETT 3/C	Alta	FC 51	2	6	10,0
Cranio S/C	Normal	FC 08	2	5	8,3
CIAIIIO 5/C	Alta	FC 30	2	6	10,0

#### D | ESPESSURA DE CORTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm. Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Protocolo	Colimação	Espessura do corte nominal (mm)	Espessura do corte medida (mm)
Abdomen S/C	1 x 16	5	5
Cranio S/C	1 x 16	2	2

### E | INDICADOR DE DESLOCAMENTO DA MESA


Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm. Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Deslocamento da mesa (mm)	Deslocamento medido (mm)
100	100
300	300



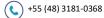





20201215/195918

DATA ENSAIO: 10/12/2020 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

#### F | INDICADOR DE POSICIONAMENTO DA MESA

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm.

Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Deslocamento nominal No gantry (mm)	Deslocamento medido (mm)
100	100
300	300

Deslocamento nominal No comando (mm)	Deslocamento medido (mm)
100	100
300	300

### G | VALOR INDICADO DO Nº DE CT


Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância: FABRICANTE

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015

Protocolo	Material	Número de CT esperado	Número de CT medido	Desvio padrão	Resultado de acordo com a DIVS	Resultado de acordo com o Fantoma
	Polipropileno	-115 a -95	-107,68	14,211	-	Conforme
	Nylon	90 a 110	93,84	15,25	-	Conforme
THOS PHANTOM	Acrílico	115 a 135	120,398	16,11	-	Conforme
	Delrin	330 a 350	334,91	15,77	-	Conforme
	Ar	-1015 a -975	-995,49	12,8	-	Conforme



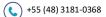





20201215/195918

# RELATÓRIO DE ENSAIO DESEMPENHO / CONSTÂNCIA TOMOGRAFIA

DATA ENSAIO: 10/12/2020 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

## H | RUIDO E EXATIDÃO DO Nº DE CT

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância Exatidão: Uniformidade do nº de CT Teste de aceitação, semanal ou após reparos. Desvio ≤ 5UH >10UH

Tolerância Ruído: ≤ 15% do valor de referência. > 20%


Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

#### Corte na água

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio padrão	Uniformidad e nº de CT	Ruido	Resultado Ruido	Resultado da Uniformidade do Nº CT:
	713,40	12h	1,76	24,10	-0,27	2,24	Conforme	Conforme
	713,40	3h	1,42	23,10	-0,61			
Abdomen S/C	713,40	Central	2,03	22,40	-			
	713,40	6h	1,33	21,50	-0,70			
	713,40	9h	1,52	23,10	-0,51			

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio padrão	Uniformidad e nº de CT	Ruido	Resultado Ruido	Resultado da Uniformidade do Nº CT:
	567,10	12h	0,36	20,60	-0,87	1,94	Conforme	Conforme
	567,10	3h	0,22	20,10	-1,01			
Cranio S/C	567,10	Central	1,23	19,40	-			
	567,10	6h	0,42	20,10	-0,81			
	567,10	9h	0,54	22,40	-0,69			



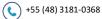





DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

#### Corte no ar

20201215/195918

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio padrão	Uniformidad e nº de CT	Ruido	Resultado Ruido	Resultado da Uniformidade do Nº CT:
	713,40	12h	-1001,59	1,50	-1001,59	0,20	Conforme	Conforme
	713,40	3h	-1000,39	1,70	-1000,39			
Abdomen S/C	713,40	Central	-1003,72	2,00	-			
	713,40	6h	-1001,76	1,50	-1001,76			
	713,40	9h	-1001,20	1,70	-1001,20			

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio padrão	Uniformidad e nº de CT	Ruido	Resultado Ruido	Resultado da Uniformidade do Nº CT:
	567,10	12h	-1001,94	1,51	-1001,94	0,18	Conforme	Conforme
	567,10	3h	-1001,52	1,51	-1001,52			
Cranio S/C	567,10	Central	-1002,12	1,84	-			
	567,10	6h	-1001,27	1,39	-1001,27			
	567,10	9h	-1001,59	1,48	-1001,59	<u> </u>		

### I | PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que diz respeito a radioproteção.

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.











20201215/195918

DATA ENSAIO: 10/12/2020 DATA EMISSÃO: 10/12/2020


# J | PARECER TÉCNICO









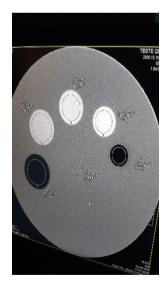







RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO



+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

